

PASstick^α

販売名：PASスティック^α



高い機能性を持った 消毒処置用塗布スティック付き
10%ポビドンヨード製剤



PVAスポンジを採用 -----
消毒剤を素早く吸収し、広範囲に、均一に
塗布できる！



スピーディで
ソフトな消毒処置

PVA スポンジは吸液が速く、消毒剤を素早く吸収します。消毒剤をしぼり出して数秒で吸液するため、スピーディに使用することができます。



高い吸液力と
十分な放液量


PVA スポンジは吸液・放液の効率も良く、患部を広くムラなく均一に消毒することができます。




清潔性
リントフリー

PVA スポンジは綿棒・綿球と比べ脱落繊維がほとんどなく、消毒部位の清潔度維持に貢献します。

脱落繊維 イメージ写真

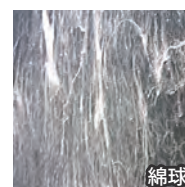

綿球

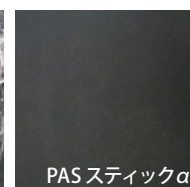

PASスティック^α




左記 QR コードから
使用方法の動画
をご覧ください。

高い吸液力と十分な放液量

PVA スポンジは高い吸液力・放液力で効率的に、患部を広くムラなく均一に消毒することができます。




PASスティックα（1本）の消毒処置イメージ

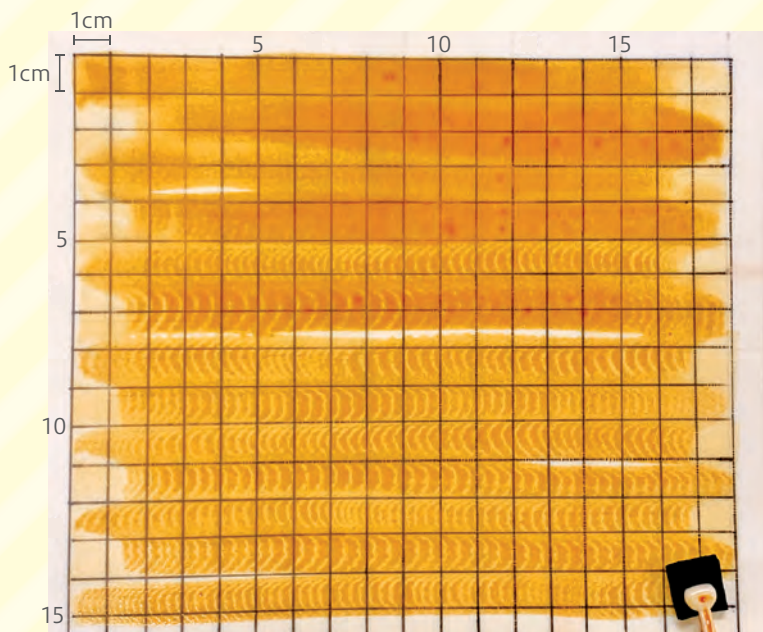


PASスティックαの1本あたりの消毒範囲の目安として
1cm方眼を記した人工皮膚に塗布した場合：約270cm²

使用方法

①裏返して図の位置をおさえる

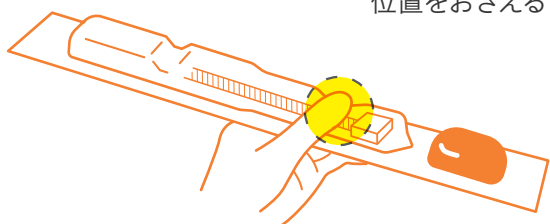


②角部を折り返し
液が残らないように
しぼり出す

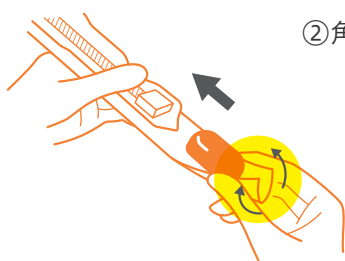


※消毒剤が残った場合は
複数回しぼってください

③消毒剤がスポンジに十分
しみ込んだことを確認する

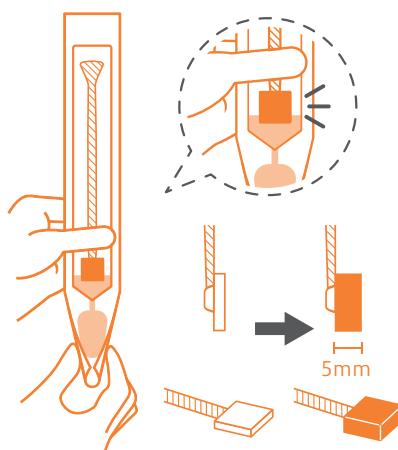


※スポンジの厚みが5mm程度
膨らんだことを確認しご使用ください

④図のように開封し
スティックを取り出す

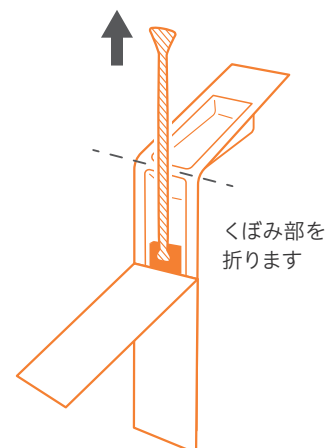

製品寸法

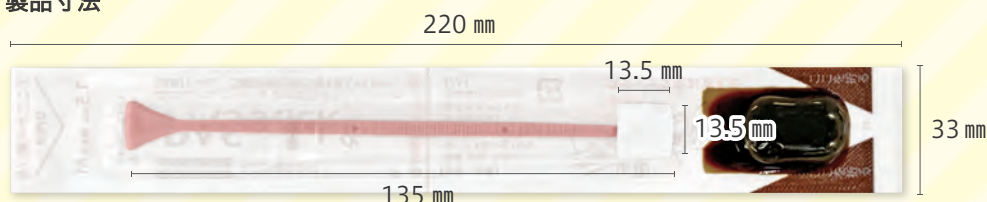

化粧箱 外観



成分 分量	担体	有効成分	液量
	医療用スポンジ	ポビドンヨード 10%	消毒用塗布具 1本あたり薬液 1.5 mL

梱包形態 入数：36包/化粧箱 梱包：12化粧箱/ケース

製造販売元

株式会社アグリス

メディカル統括管理部

東京都千代田区内神田 1-6-6 MIF ビル 6F
TEL：03-3233-2077 / FAX：03-3233-2079

www.aglis.co.jp



M0011-0002