

使用方法



消毒液を十分に吸液させてからご使用ください。消毒液の吸液が不十分な場合、スポンジの一部が硬いまま塗布してしまうと、皮膚を傷つける恐れがございます。

吸液時間の目安は、ワイド L の場合、ポビドンヨードで約 40 秒、アルコール系消毒液で約 120 秒です（右表）。

吸液時間の目安（社内測定）

	ワイド L	ワイド M	ショート S
ポビドンヨード	40 秒	40 秒	30 秒
アルコール系消毒液	120 秒	120 秒	60 秒

※スポンジ面を消毒液に浸して含浸させてください。アルコール系消毒液に関しては、吸液に時間がかかる場合がございます。

ラインナップ

スポンジ形状	スポンジサイズ	入数	販売単位	品番	JANコード
	Lサイズ 厚さ：20mm	1 本入	30 袋 / 箱	CVP002K	4987794982360
		2 本入	20 袋 / 箱	CVP006K	4987794982346
	Mサイズ 厚さ：10mm	1 本入	30 袋 / 箱	CVP001K	4987794982353
		2 本入	20 袋 / 箱	CVP005K	4987794982377
	Lサイズ 厚さ：20mm	1 本入	30 袋 / 箱	CVP013K	4987794982391
		2 本入	20 袋 / 箱	CVP014K	4987794982414
	Mサイズ 厚さ：10mm	1 本入	30 袋 / 箱	CVP010K	4987794982384
		2 本入	20 袋 / 箱	CVP011K	4987794982407
	Sサイズ 厚さ：10mm	1 本入	30 袋 / 箱	CVP007K	4987794982421
		2 本入	20 袋 / 箱	CVP008K	4987794982438


使用本数の目安

スポンジサイズ	頭部	腕部	腹部	背部	脚部
Lサイズ	1 本	1 本	2 本	2 本	2 本
Mサイズ	2 本	2 本	4 本	3 本	4 本

包装外観（ワイド L / 2 本入）



梱包箱サイズ

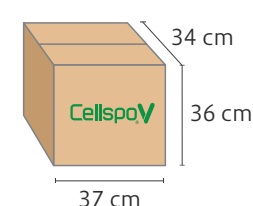

製造販売元

株式会社アグリス

メディカル統括管理部

東京都千代田区内神田 1-6-6 MIF ビル 6F
TEL：03-3233-2077 / FAX：03-3233-2079



M0007-0001

術野消毒の常識をアップグレード

aglis

消毒液容器付き消毒処置用塗布スティック

CellspoV[®] PLUS
セルスポバイ プラス



広範囲の術野消毒処置と
消毒液の効率的使用が可能



（1 本入）

（2 本入）

EOG 滅菌済

一般医療機器
医療用スポンジ

販売名：セルスポバイ
届出番号：40B2X00022000018

画期的な術野消毒を実現!!

スピーディー & スムーズ & エコノミー


- 高い吸液 / 放液力により消毒液を効率的に使用
- 優れた放液性でスピーディーに広範囲の消毒が可能
- 塗りムラや液だれがほとんどなく、垂れ込みも低減
- 消毒液を均一に塗布でき、ドレープの定着性が良く、はがれにくい
- 専用の消毒液容器を使用することで、消毒液の無駄を省きます
- 綿球・綿棒に比べて脱落繊維がほとんどない為、手術室の清浄度、感染リスクの低下に貢献



腕部消毒の様子



形成外科：乳房再建術

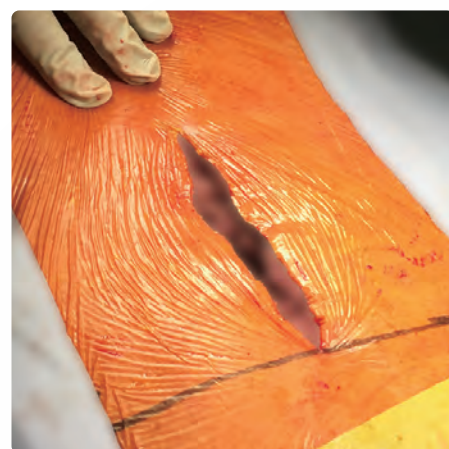


脊椎手術の消毒後のドレーピング状態



下肢消毒の様子


消毒の術野に対応した先端形状

ワイドタイプ

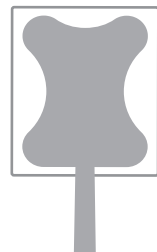

腹部・背部・
大腿部 等

スポットタイプ

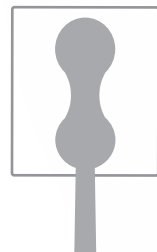

腕部・脚部・
指間 等

ショートタイプ



腕部・指間・
頭部 等

スポンジサイズ ※数字は吸液後のサイズ



L サイズ
寸法：41×35mm
厚さ：20mm



M サイズ
寸法：41×35mm
厚さ：10mm



S サイズ
寸法：30×24mm
厚さ：10mm

ワイドL




スポットM



PVA スポンジの高い吸放液力

綿球より消毒液の吸液 / 放液の効率に優れ、無駄のない消毒処置が可能（右表）

綿球#40とセルスポバイ（ワイドL）のポビドンヨードの吸放液量の比較

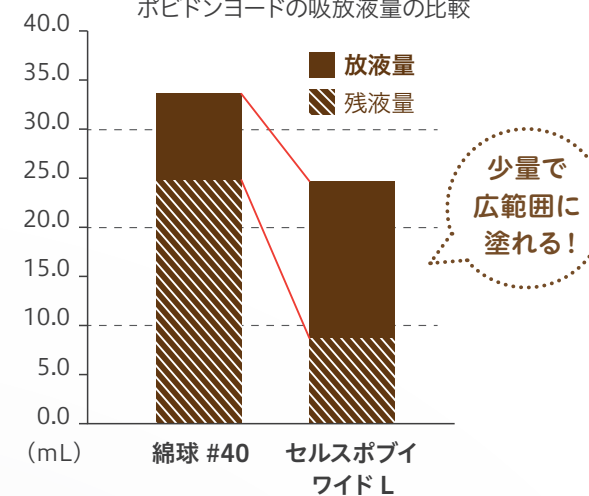

少量で
広範囲に
塗れる!

■ 10%ポビドンヨードの吸放液量

	ワイドL	ワイドM	ショートS	綿球#40	綿球#30
吸液量 (mL)	24.7	13.3	6.5	33.7	14.2
放液量 (mL)	16.0	7.2	3.6	8.9	4.0
放液率	65%	54%	55%	26%	28%

■ 80%アルコールの吸放液量

	ワイドL	ワイドM	ショートS	綿球#40	綿球#30
吸液量 (mL)	33.6	14.9	7.6	35.5	14.3
放液量 (mL)	20.4	7.3	3.8	8.4	3.4
放液率	61%	49%	51%	24%	24%

※上表は一定量 (40/20/10mL) の消毒液に浸した後の吸液量、1.5kg のおもりで1分間加圧した場合の放液量を測定。放液率は吸液量と放液量から算出。(自社調べ) ※綿球 (#40/#30) は一般的な綿球を使用。

専用容器で準備作業の省力化と消毒液の効率化

- 専用の消毒液容器を同封しているのので、消毒液カップ等の準備の手間を省略
- 目盛に合わせて必要な量だけ注ぐので、消毒液を無駄なく効率的に使用できる



スポンジサイズ別に消毒液量の目安を表示

ショートS



専用容器 (2本用)



専用容器 (1本用)

専用容器のフチには溝があり、セルスポを