


## ■ セルスポバイと綿球の消毒液使用量および放液率

セルスポバイに使用されている PVA スポンジは液体を良く吸収し、力を加えると良く放出する性質を持っています。よって、広範囲に塗布が可能で無駄に捨てていた消毒液を有効に使うことができます。


|             | セルスポバイ<br>ワイド M | セルスポバイ<br>ワイド L | #30 綿球 | #40 綿球 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 吸液量<br>(mL) | 13.3            | 24.7            | 14.2   | 33.7   |
| 放液量<br>(mL) | 7.2             | 16.0            | 4.0    | 8.9    |
| 放液率         | 54 %            | 65 %            | 28 %   | 26 %   |

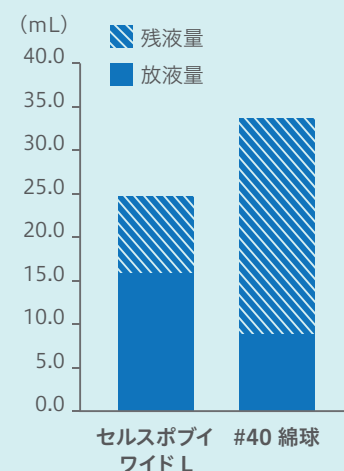

※40mL または 20mL の消毒液 (10% ポビドンヨード液) に浸した後の吸液量、及び 1.5kg のおもりで 1 分間加圧した場合の放液量を測定。放液率は吸液量と放液量から算出。(自社調べ)

## ■ セルスポバイと綿球の脱落繊維量比較

セルスポバイに使用されている PVA スポンジは脱落繊維がほとんどないため、手術室の清浄度維持、感染リスクの低下に貢献します。

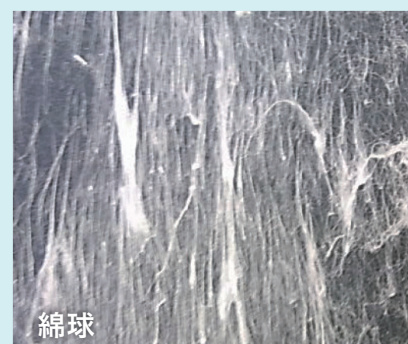

脱落繊維イメージ写真▶

aglis

一般医療機器 医療用スポンジ  
届出番号 40B2X00022000018

EOG 滅菌済

消毒処置用塗布スティック

# Cellspov®

セルスポ®バイ



## 術野消毒の新しいスタンダードへ

製造販売元

株式会社 **アグリ**ス

メディカル統括管理部

東京都千代田区内神田 1-6-6 MIF ビル 6F  
TEL : 03-3233-2077 / FAX : 03-3233-2079

www.aglis.co.jp



M0008-0002

肌に優しい PVA スポンジを使用した **新しい消毒液塗布具**です！



■ **使用方法**

※別途、消毒液や万能壺・シャーレ等をご準備ください。

1本あるいは2本ずつ包装し EOG 滅菌を施しておりますので、開封してからそのままお使いいただけます。  
スポンジと柄が一体になっていますので、スムーズに消毒処置が行えます。



用途に合わせて  
使い分けできます



**Wide** ワイドタイプ

腹部・背部・大腿部・腕部 など



**Spot** スポットタイプ

手指・足指 など

| 使用本数の<br>目安 | スポンジ<br>サイズ | 頭 #30 綿球<br>3-4 個 | 腕 #30 綿球<br>3-4 個 | 腹 #30 綿球<br>6-8 個 | 背 #30 綿球<br>5-6 個 | 足 #30 綿球<br>6-8 個 |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | M           | 2 本               | 2 本               | 4 本               | 3 本               | 4 本               |
|             | L           | 1 本               | 1 本               | 2 本               | 2 本               | 2 本               |

**Wide** ワイドタイプ



ワイド M



ワイド L

**Spot** スポットタイプ



スポット M



スポット L

**Short** ショートタイプ




ショート S

1 本入り包装品



| 品 番     | 品 名            | 入 数            | 販売単位         |
|---------|----------------|----------------|--------------|
| CV0001K | セルスポバイ<br>ワイドM | 20袋/箱<br>(20本) | 6箱<br>(120本) |
| CV0002K | セルスポバイ<br>ワイドL | 20袋/箱<br>(20本) | 6箱<br>(120本) |

2 本入り包装品

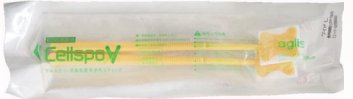

| 品 番     | 品 名                   | 入 数            | 販売単位         |
|---------|-----------------------|----------------|--------------|
| CV0005K | セルスポバイ<br>ワイドM (2本入り) | 20袋/箱<br>(40本) | 6箱<br>(240本) |
| CV0006K | セルスポバイ<br>ワイドL (2本入り) | 20袋/箱<br>(40本) | 6箱<br>(240本) |

1 本入り包装品



| 品 番     | 品 名             | 入 数            | 販売単位         |
|---------|-----------------|----------------|--------------|
| CV0010K | セルスポバイ<br>スポットM | 20袋/箱<br>(20本) | 6箱<br>(120本) |
| CV0013K | セルスポバイ<br>スポットL | 20袋/箱<br>(20本) | 6箱<br>(120本) |

2 本入り包装品



| 品 番     | 品 名                    | 入 数            | 販売単位         |
|---------|------------------------|----------------|--------------|
| CV0011K | セルスポバイ<br>スポットM (2本入り) | 20袋/箱<br>(40本) | 6箱<br>(240本) |
| CV0014K | セルスポバイ<br>スポットL (2本入り) | 20袋/箱<br>(40本) | 6箱<br>(240本) |

1 本入り包装品



| 品 番     | 品 名             | 入 数            | 販売単位         |
|---------|-----------------|----------------|--------------|
| CV0007K | セルスポバイ<br>ショートS | 20袋/箱<br>(20本) | 6箱<br>(120本) |

2 本入り包装品



| 品 番     | 品 名                    | 入 数            | 販売単位         |
|---------|------------------------|----------------|--------------|
| CV0008K | セルスポバイ<br>ショートS (2本入り) | 20袋/箱<br>(40本) | 6箱<br>(240本) |