

入浴時の留置カテーテル管理に

aglis


カテバス®キット

単回使用クラス I 処置キット

入浴時

入口より下の部分は、他の部分と同様に洗うことができます。入口部分は長時間にわたり水に浸けないようにご注意ください。

入浴後

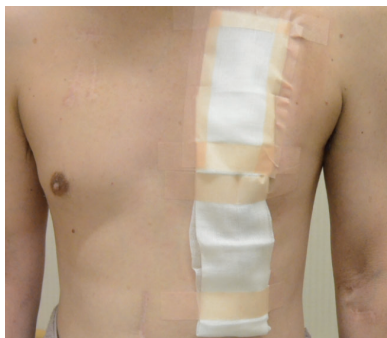

ガーゼ（又はカテスポ）とテープを使い、各医療機関の指示に従ってカテーテルを保護してください。



規格：MF-1001

- | | | |
|---------------------------|-------|-------|
| ① トレー | _____ | 1 枚 |
| ② カテバス® | _____ | 1 枚 |
| ③ 紙軸綿棒（弱コート） | _____ | 3 本 |
| ④ オリガーゼ 7.5×7.5cm 16P | _____ | 3 枚 |
| ⑤ 優肌絆® 25×150mm 2 列（2 つ折） | _____ | 3 シート |

入浴中の落下菌やゴミの付着を低減する目的で、間仕切紙が入っております。入浴後に取り除き、そのまま廃棄ください。

カテーテル保護用の
袋状ガーゼ『カテスポ』
入りのタイプもございます。



規格：MF-1002


- | | | |
|---------------------------|-------|-------|
| ① トレー | _____ | 1 枚 |
| ② カテバス® | _____ | 1 枚 |
| ③ 紙軸綿棒（弱コート） | _____ | 3 本 |
| ④ オリガーゼ 7.5×7.5cm 16P | _____ | 3 枚 |
| ⑤ カテスポ | _____ | 1 枚 |
| ⑥ 優肌絆® 25×150mm 2 列（2 つ折） | _____ | 3 シート |

使用方法


1 カテバス®を取り出す




フタを開け口から半分ほど剥がし、カテバス®を取り出して広げます。

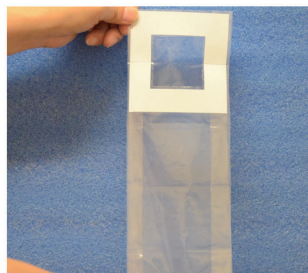

2 カテーテルを入れる

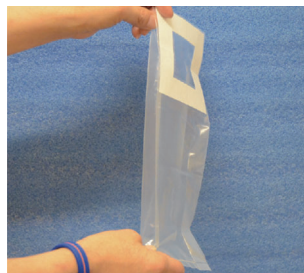


マチを軽く広げ、入口からカテーテルを入れていきます。

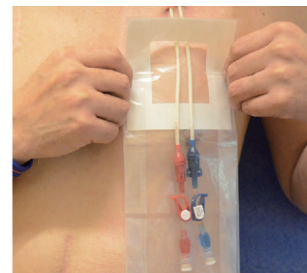

3 貼り付ける



粘着剤部分のはくり紙をはがし、袋内の空気を抜きながら密着させます。このときシワが入ると水漏れの原因になります。

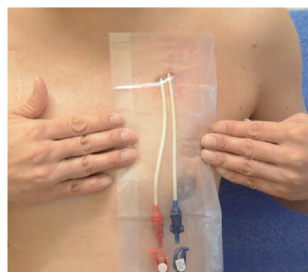

4 入浴




入口より下の部分は、他の部分と同様に洗うことができます。入口部分は長時間にわたり水に浸けないようにご注意ください。




5 消毒する



綿棒を使い、各医療機関の指示に従って消毒をおこなってください。
※消毒剤は別途ご用意ください。

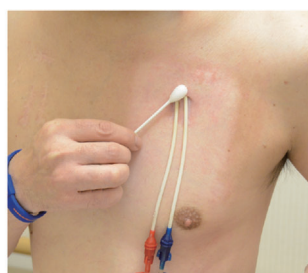

6 保護する

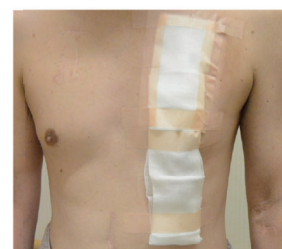

スポッと入る

⚠ 注意

- ・個人差により、皮膚がかぶれることがあります。ご使用になる前にパッチテストを行ってください。
- ・本品はディスポーザブル製品です。再使用はしないでください。

ガーゼとテープを使い、各医療機関の指示に従ってカテーテルを保護してください。

