

針・シリンジ、消毒剤がついていないキットもございます。



シーパック アルファ
SEE@
Safety Easy Economy plus "α"


スタンダードなトレイタイプの消毒用処置キットです。2つの薬液槽と独立した綿棒槽を備えているため、清潔な操作が可能です。EOG滅菌済ですので開封後、すぐにご使用いただけます。

■ 使用方法についてはアグリス処置キットC-IIをご参照ください。

製品規格 ①トレイサイズ：160×120mm（深さ：22mm）
梱包サイズ：660×450×370mm
入数：240 個 / 入
②トレイサイズ：160×120mm（深さ：27mm）
梱包サイズ：660×420×370mm
入数：180 個 / 入

処置キット導入で業務改善

消毒処置に必要な器具・衛生材料をキット化し、準備・洗浄・滅菌等にかかる作業時間を短縮、業務のランニングコスト・作業コストの削減を図ることができます。

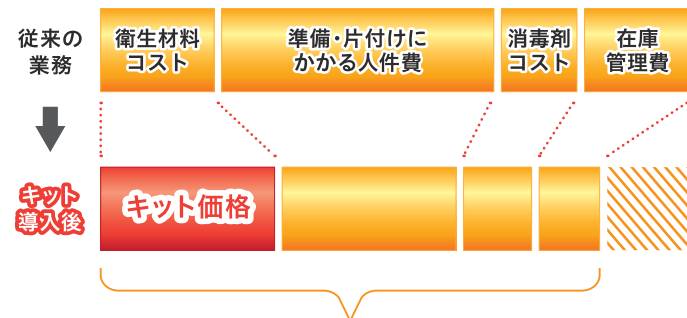


トータルコストの削減!!

※上記のグラフはイメージです。詳細は営業担当者までご相談ください。

様々な部材をご用意

掲載している部材以外にも 300 種類以上の部材を取り扱っております。部材についてご要望がございましたら営業担当者までご相談ください。

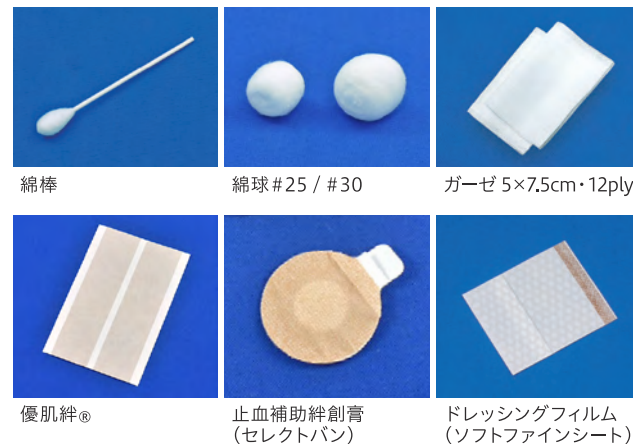

※優肌絆®は日東電工(株)の登録商標です。

品名	販売名	一般的名称	クラス分類	届出・承認番号	滅菌方法
アグリス処置キットC-II	アグリス処置キットC-II	単回使用クラスII処置キット	管理医療機器	30400BZX00199000	EOG
EPACK (イーパック)	アグリス消毒処置キット	透析開始・終了セット	管理医療機器	23000BZX00263000	EOG※
シーパックアルファ	SEE パック-アルファ	単回使用クラスI処置キット	一般医療機器	40B2X00022000005	EOG

※消毒剤は未滅菌です。

製造販売元
株式会社アグリス

メディカル統括管理部
東京都千代田区内神田 1-6-6 MIF ビル 6F
TEL : 03-3233-2077 / FAX : 03-3233-2079
www.aglis.co.jp



M0002-0001

様々な消毒処置の改善・効率化へ

消毒マルチキット



感染対策 **スピーディな作業** **処置の均一化**

在庫管理の簡素化 **洗浄・滅菌のコスト削減**

アグリス 処置キット C-II

2つの薬液槽を備えたトレイタイプの消毒ケアキットです。消毒処置に必要な衛生材料に加えて、注射針とシリンジが入っております。EOG滅菌済ですので、開封後すぐにご使用いただけます。

内容部材例



シリンジ DS2.5mL ハリナシ/ロック
シリンジ DS5mL ハリナシ/ロック
シリンジ DS10mL ハリナシ/ロック



フローマックス 18GX1 1/2 RB GA
フローマックス 23G*1 RB GA
フローマックス 25G*1 RB GA
フローマックス 27G*3/4 SB
フローマックス 30G*1/2 SB



NR シリンジ DS2.5mL スリッ/ロック
NR シリンジ DS5mL スリッ/ロック
NR シリンジ DS10mL スリッ/ロック




カテラン針 23G*70RB GA
ISO80369-6
NR 採液針 18GX1 1/2 SB



ネオグリップピンセット




綿球 #20

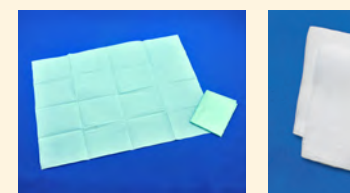

防水シート
38×48cm



ガーゼ
7.5×7.5cm・12ply

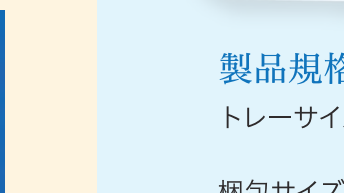

ドレッシングフィルム
(サージンパッド) 5×8cm

トレーには薬液槽が2箇所

製品規格

トレーサイズ：160×120mm（深さ：27mm）
梱包サイズ：660×420×370mm
入数：120 個 / 入


使用方法



① キット本体を開封する。



② 薬液槽内の綿球に消毒剤を注ぐ。

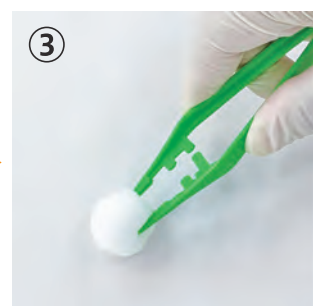

③ 綿球で患部を消毒し、処置を行う。




防水シートは処置部位の下に敷く他に、部材を置くための清潔野としてもご使用いただけます。

イーパック EPACK Ethical Pharmaceuticals Antiseptic Care Kit

消毒ケアキットと1.0w/v濃度のクロルヘキシジングルコン酸塩液（エタノール含有/医療用医薬品）を組み合わせたキットです。定量化された消毒剤を使用することで、準備作業の省力化や消毒剤の節約によるコスト削減が図れます。

内容部材例

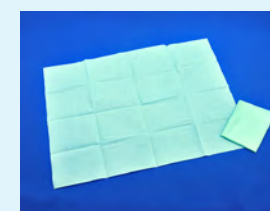

防水シート
38×48cm



ガーゼ
7.5×7.5cm・12ply



ドレッシングフィルム
(サージンパッド) 5×8cm



PASスティック ショートM

PASスティックショートMの特徴

スポンジは脱落繊維がほとんどなく、スピーディ・スムーズに消毒剤を広範囲に塗布できます。また、吸液と放液の効率が良いので、消毒剤を効率的に使用します。

※下記使用方法を参照

※EPACK には針・シリンジを入れることができません。




製品規格

トレーサイズ：195.5×102mm（深さ：32mm）
梱包サイズ：610×420×375mm
入数：120 個 / 入

外用殺菌消毒剤 医療用医薬品

販売名：クロルヘキシジングルコン酸塩 AL 外用液 1.0%「アグリス」
承認番号：23000AMX00591000
内容量：3 mL
有効成分：1.0w/v% クロルヘキシジングルコン酸塩液

※消毒剤は未滅菌です。

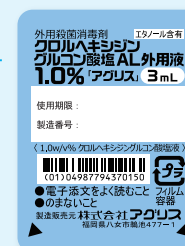

使用方法




① キット本体を開封する。



② 消毒剤を開封する。



③ PAS スティック ショートMを消毒剤へ約30秒間含浸する。

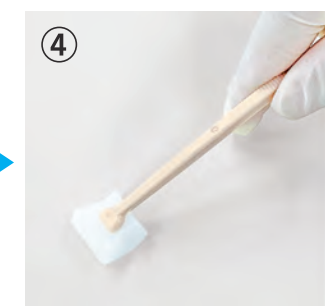

④ PAS スティック ショートMで患部を消毒し、処置を行う。